


Turbuhaleri kasutusjuhend

Patsiendi info

Pilt 1

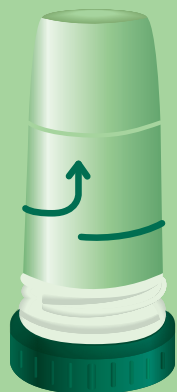

Keerake lahti ja eemaldage kaitsev ümbris. Hoidke Turbuhaler püstiasendis, värviline osa allpool.

Pilt 3

Hingake sügavalt välja. **NB!** Ärge hingake inhalaatorisse! Asetage Turbuhaleri suuotsik hammaste vahele ja sulgege tihedalt huuled. Hingake sügavalt ja jõuliselt sisse. Hoidke hinge kinni kuni 10 sekundit.



Pilt 2a

Pilt 2b

Keerake värvilist osa paremale lõpuni ja siis tagasi vasakule **kuni kuulete klõpsu**. Klõpsatus näitab, et annus on sissehingamiseks valmis. Peale klõpsu ärge alumist osa rohkem keerake!




Klõps

Pilt 4

Eemaldage Turbuhaleri suust ja hingake läbi nina välja.

NB! Pärast põletikuvastase ravimi inhaleerimist loputage suud mitu korda veega ja sülitage loputusvesi välja.

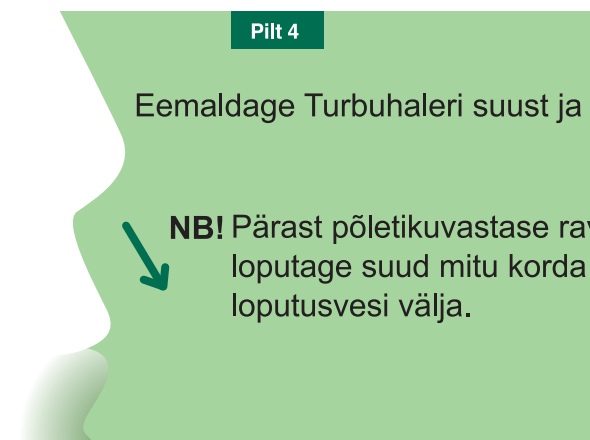

ITK 648